

Avvertenze per il paziente per l'applicazione la rimozione e la pulizia del dispositivo su misura individuale rimovibile

- 1. Manipolare con attenzione per evitare cadute del dispositivo.*
- 2. Assicurarsi di inserire il dispositivo superiore nell'arcata superiore, quello inferiore nell'arcata inferiore.*
- 3. Inserire con due mani il dispositivo in situ.*
- 4. Trovare la posizione corretta per l'inserzione senza eccessive pressioni.*
- 5. Chiudere la bocca solo quando il dispositivo è perfettamente posizionato.*
- 6. Disinserire il dispositivo rimovibile seguendo la procedura inversa rispetto a quella riportata per l'applicazione.*

Ti ricordiamo innanzitutto che le mascherine possono compiere il proprio lavoro solo quando le indossi.

Fondamentale quindi è la Tua collaborazione: dovrai indossare l'allineatore giorno e notte, togliendolo SOLAMENTE durante i pasti e per l'igiene orale.

Generalmente la mascherina che stai utilizzando dopo 14 giorni va sostituita con la successiva (tranne diversa indicazione del clinico) poiché completa la sua funzione.

Diminuire le ore quotidiane aumentando il numero di giorni di utilizzo dell'allineatore NON costituisce una pratica alternativa valida, bensì compromette la possibilità di raggiungere l'obiettivo desiderato.

Una volta terminate le mascherine in Tuo possesso è importante continuare ad indossare l'ultimo allineatore fino a che non riceverai dal tuo odontoiatra ulteriori allineatori o dei dispositivi di contenzione.

Pulizia della mascherina


Prima di ogni utilizzo pulire con uno spazzolino, acqua fredda e sapone.

Non utilizzare mai acqua calda in quanto il materiale di cui sono composti gli allineatori, si deforma con il calore.

Non utilizzare collutori per pulire l'allineatore, potrebbero opacizzarla o colorarla rovinando il suo aspetto estetico.

Mentre le indossi ti consigliamo di NON bere bevande coloranti (caffè, thè, vino rosso, liquirizia ecc.) per evitare di macchiarle.

Gli allineatori vanno indossati sempre con i denti puliti.

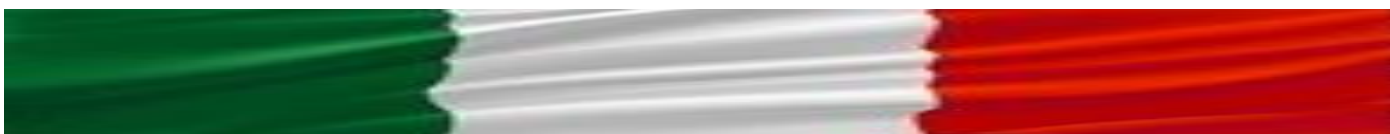

Patient warnings for application, removal and cleaning of the removable individual custom-made device

- 1. Handle carefully to prevent the device from falling.*
- 2. Be sure to insert the upper device into the upper arch, the lower one into the lower arch.*
- 3. Insert the device in situ with two hands.*
- 4. Find the correct position for insertion without excessive pressure.*
- 5. Close your mouth only when the device is perfectly positioned.*
- 6. Disconnect the removable device by following the reverse procedure to that indicated for the application*

First of all, we remind you that aligners can only do their job when you wear them. Your collaboration is therefore essential: you will have to wear the aligner day and night, taking it off ONLY during meals and for oral hygiene.

Generally the aligner you are using after 14 days must be replaced with the next one (unless otherwise indicated by the clinician) as it completes its function. Decreasing the daily hours by increasing the number of days of use of the aligner is NOT a valid alternative, but compromises the possibility to achieve the desired goal.

Once you have finished the aligners in your possession, it is important to continue wearing the last aligner until you receive additional aligners or retention devices from your dentist.

Cleaning of the aligner

Before each use, clean with a toothbrush, cold water and soap.

Never use hot water as the material of which the aligners are made deforms with heat.

Do not use mouthwashes to clean the aligner, they could stain or color it, ruining its aesthetic appearance.

While wearing them we advise you NOT to drink coloring drinks (coffee, tea, red wine, licorice exc.) to avoid staining them.

Aligners should always be worn with clean teeth.

